

仕様・価格



WSC-2900
WEB サイト

型式・名称	WSC-2900 ローテーター atto
回転数	10 ～ 80rpm
アングル調整範囲	0°～ 90°
タイマー	1 ～ 9999min
ターンテーブル (オプション)	A : 50mL コニカルチューブ× 10 本 B : 15mL コニカルチューブ× 18 本 C : 1.5mL エッペンチューブ× 64 本 E : 50mL × 10 本 / 15mL × 10 本 / 1.5mL × 30 本 ※積層ホルダーを使用して 2 段重ね可能
電源	AC100V 50/60Hz 35W
寸法	206 (W) × 260 (D) × 300mm (H)
質量	4.5kg (本体のみ)
使用環境	4℃～ 45℃ (結露なきこと)

各部名称と寸法



価格

商品コード	型式・名称	数量	価格
4002900	WSC-2900 ローテーター atto (Rotator atto)	1 台	99,800 円
4002940	ターンテーブル (WSC-2900 用) A	1 個	31,800 円
4002941	ターンテーブル (WSC-2900 用) B	1 個	31,800 円
4002942	ターンテーブル (WSC-2900 用) C	1 個	31,800 円
4002944	ターンテーブル (WSC-2900 用) E	1 個	31,800 円
4002949	積層ホルダー (WSC-2900 用)	1 個	12,800 円

Tabletop small volume rotary mixer (卓上小型小容量回転混合器)

WSC-2900 ローテーター atto (Rotator atto)

2026 年 9 月 価格改訂版

50ml conical tube
15ml conical tube
1.5ml eppendorf tube



Speed : 10 ～ 80rpm

Timer : 1 ～ 9999min

Angle : 0 ～ 90°



アトー株式会社

生化学・分子生物学・遺伝子工学研究機器
開発/生産/販売/サービス

主要製品

●発光・蛍光イメージングシステム
●画像解析ソフトウェア ●電気泳動装置
●電気泳動関連試薬 ●ウェスタンブロット試薬
●ペリスタポンプ ●細胞培養・観察システム

■東京本社 〒111-0041 東京都台東区元浅草3-2-2 ☎(03)5827-4861(代表) ☎(03)5827-6647
■大阪支店 〒530-0044 大阪市北区東天満2-8-1 ☎(06)6136-1421(代表) ☎(06)6356-3625
若杉センタービル別館 5F
■技術開発センター 〒110-0016 東京都台東区台東2-21-6 ☎(03)5818-7560(代表) ☎(03)5818-7563
◆メンテナンスサービスグループ ☎(03)5818-7567(代表) ☎(03)5818-7563

■URL <https://www.atto.co.jp/> お問い合わせ WEB会員登録の上お問い合わせフォームをご利用ください。

2023.9





ローテーター atto

「ローテーター atto」は回転式のみキシング装置です。50mL/15mL のコニカルチューブ、1.5mL のエッペンチューブのみキシングが可能です。

主なみキシング用途

- ・ DNA やタンパク質などサンプル抽出
- ・ 培養用みキシング
- ・ 免疫沈降

機能

- ・ アングル角度調整：0 ～ 90°
- ・ 回転速度可変：10 ～ 80 rpm
- ・ タイマー：1 ～ 9999min
- ・ タイマー「0」：連続運転



ターンテーブルのアンクル（角度）調整

ターンテーブルは垂直状態（0°）～水平状態（90°）まで角度調整が可能です。角度を変えることで、チューブ内の溶液を効率よく攪拌可能です。



ターンテーブルの 2 段重ね

積層ホルダーを使用すると、ターンテーブル A/B/C/E を 2 段重ねで使用できます。同時に複数のチューブを大量に回転させることが可能です。




オプション

ターンテーブル A

価格	31,800 円
チューブタイプ	50mL コニカルチューブ
最大本数	10 本

※バランスをとって使用してください。

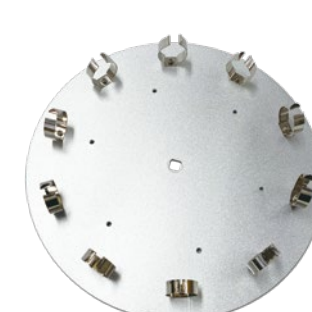

ターンテーブル A



※チューブは付属しません

ターンテーブル B

価格	31,800 円
チューブタイプ	15mL コニカルチューブ
最大本数	18 本

※バランスをとって使用してください。



ターンテーブル B



※チューブは付属しません

ターンテーブル C

価格	31,800 円
チューブタイプ	1.5mL エッペンチューブ
最大本数	64 本

※バランスをとって使用してください。



ターンテーブル C




※チューブは付属しません

ターンテーブル E

価格	31,800 円
チューブタイプ	50mL コニカルチューブ 15mL コニカルチューブ 1.5mL エッペンチューブ
最大本数	50mL：10 本 15mL：10 本 1.5mL：30 本

※バランスをとって使用してください。

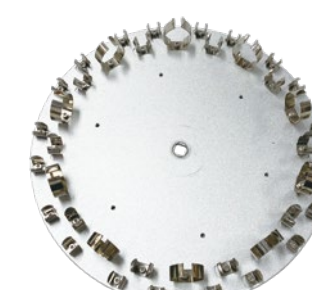

ターンテーブル E



※チューブは付属しません

積層ホルダー

価格	12,800 円
用途	ターンテーブルを 2 段重ねで使用するためのジョイントです。
ターンテーブル	ターンテーブル A/B/C/E 対応



積層ホルダー

