



ストリッピング反応は簡単です

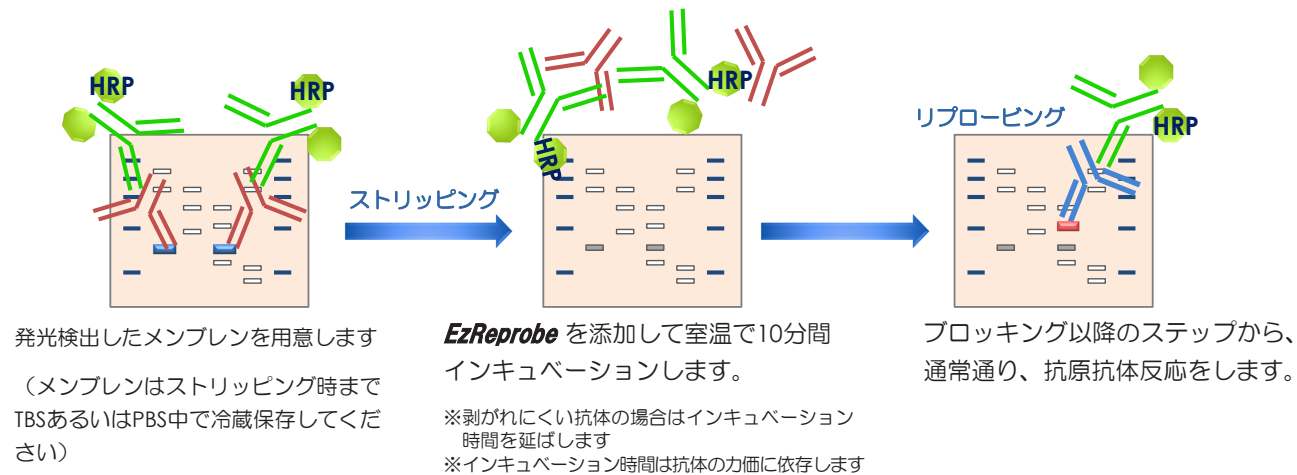

繰り返してもきれいなデータがとれます

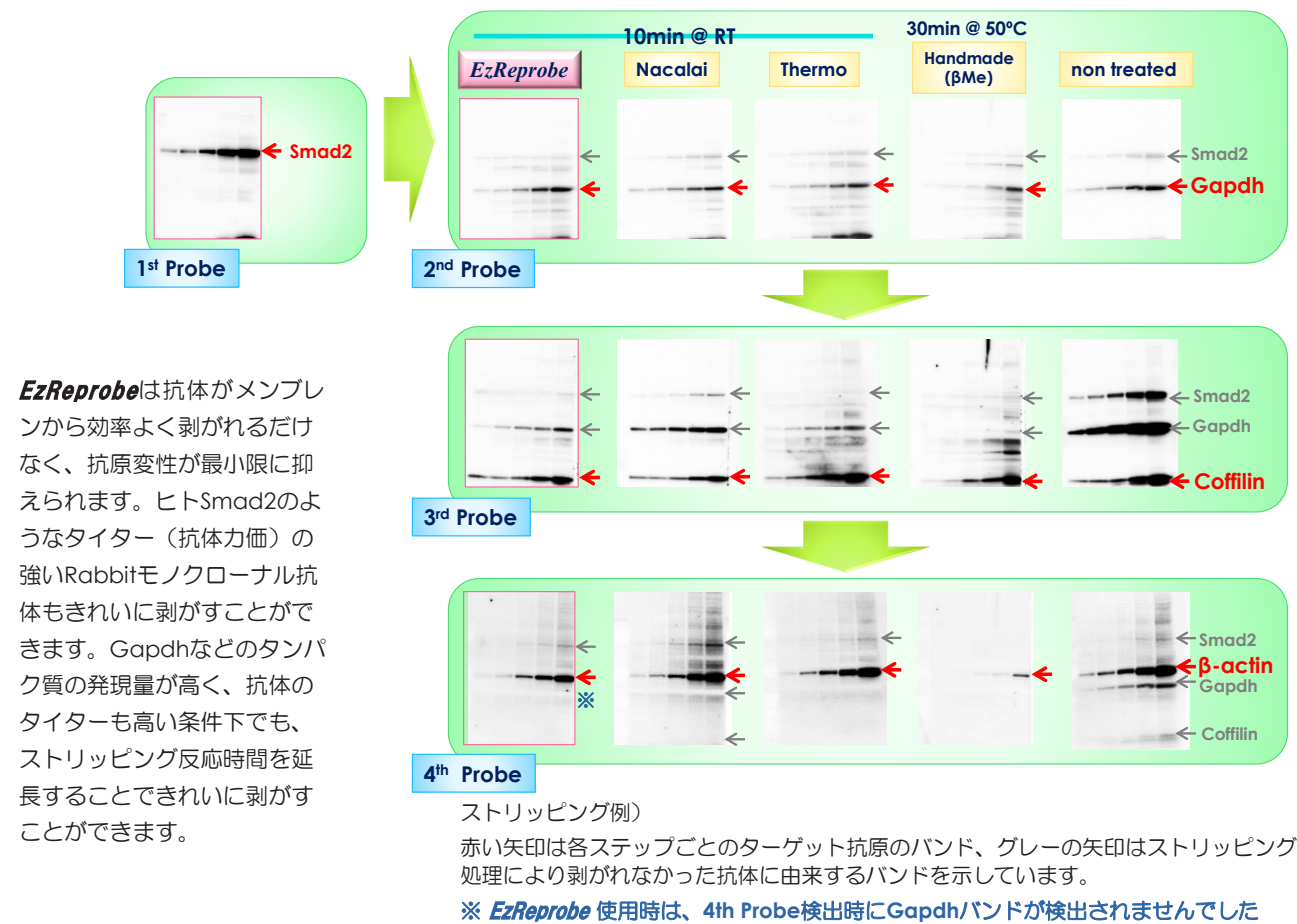

構成

型式	製品名	容量	価格	保存・輸送
WSE-7240	イージーリプローブ EzReprobe	溶液：500mL + エンハンサー：3g	¥17,800	室温保存

WB用ストリッピング試薬

WSE-7240

イージーリプローブ

EzReprobe

ウェスタンブロットティング用抗体剥離溶液



室温で10分間インキュベーションするだけで抗体がはがれます。ストリッピングとリプロービングを繰り返し反応することも可能です。



こんな時にお使いください。

ウェスタンブロットティングは電気泳動から始まり、プロットティング、ブロッキング、1次・2次の抗体反応を経て結果が得られます。各ステップ毎に複雑な反応条件を検討したにもかかわらず、データが得られなかったり、サンプル量が不足してやり直せなかったりという経験はありませんか？ このような時にご使用いただきたいのが**EzReprobe**です。**EzReprobe**は簡単かつ効率よく抗体をプロットから剥がせる（ストリッピング）だけでなく、抗原の変性を最小限に抑えることが可能で、同一メンブレン上で検出を繰り返し行うことができます。

- ◆ サンプル量が限られている場合
- ◆ 定量的な解析を行いたい場合

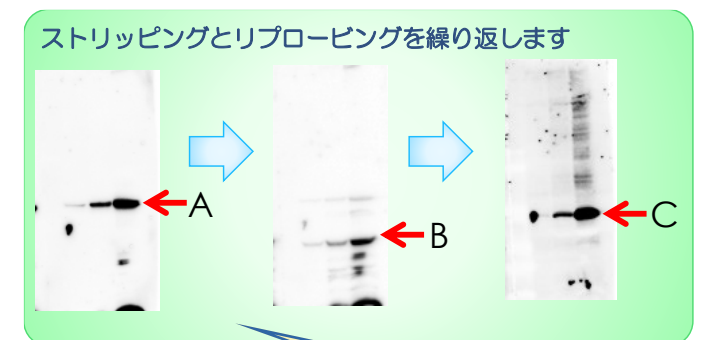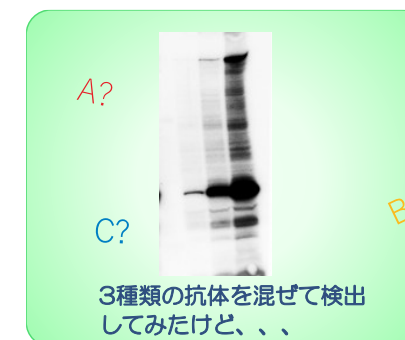

- ◆ ブロッキングに失敗した場合
- ◆ 抗体の希釈率が適正でなかった場合



抗体反応条件を再度検討しなおして、リプロービングすることで、よりよい結果が得られます。

3つのターゲットが1枚のメンブレンから検出できます