



# 新製品のご案内


2023年6月

## EzBradford Protein Assay Kit

タンパク質定量ブラッドフォード試薬

界面活性剤を含むサンプルのタンパク質定量が可能

初回購入30%OFFキャンペーン  
2024年3月31日まで

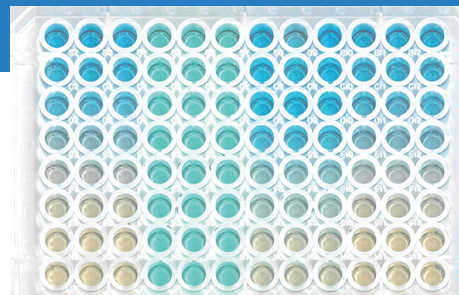


## EzBCA Protein Assay Kit

タンパク質定量BCAアッセイ試薬

還元剤を含むサンプルのタンパク質定量が可能

初回購入30%OFFキャンペーン  
2024年3月31日まで

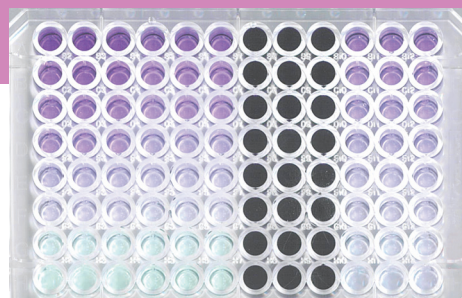

## KronoAnalyzer


リズム解析用ソフトウェア

データ解析対応測定装置 ATTO

WSL-1565 Kronos HT  
AB-2550 Kronos Dio  
AB-2500 Kronos

複数の計測データ比較  
リズム解析

期間限定キャンペーン  
2023年8月31日まで

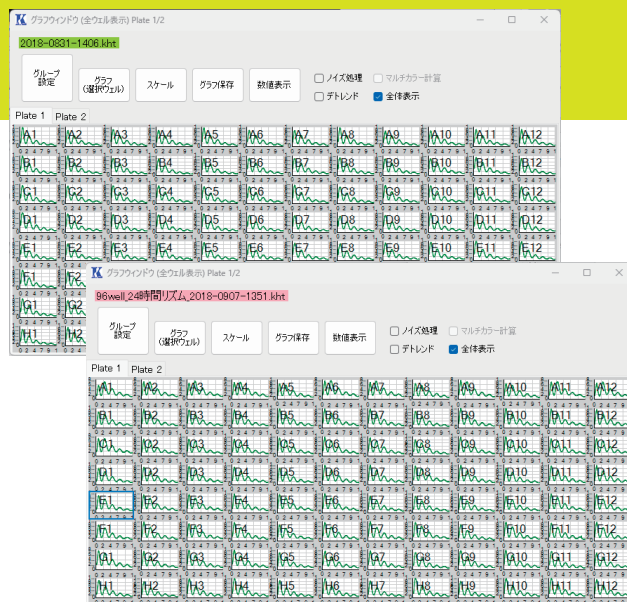

# EzBradford Protein Assay Kit

イージーブラッドフォード プロテイン アッセイキット

**総タンパク質定量用  
ブラッドフォード試薬**



ウェブサイト  
詳細情報

特典有効期間 2024年3月31日まで


**界面活性剤を含むサンプルでもタンパク質定量が可能**

商品構成	容量	保存温度
① Bradford Reagent	500 mL	4~10℃
② Protein Diluent	50 mL	4~10℃
③ BSA Standard (2mg/mL)	10 mL	4~10℃
④ BGG Standard (2mg/mL)	10 mL	4~10℃




「界面活性剤」を含むタンパク質溶液の定量手順

STEP-1

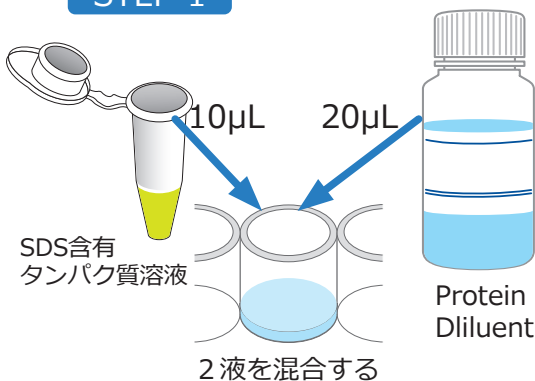

STEP-2

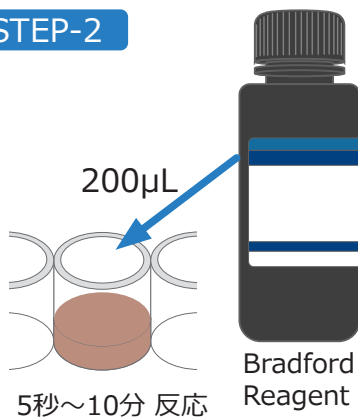

STEP-3



STEP-4



初回購入特典 **30%OFF**

特典有効期間 2024年3月31日


商品コード	型式・名称	容量	特別価格 (税別)	温度管理
2332383	WSE-7510CP EzBradford Protein Assay Kit イージーブラッドフォード プロテインアッセイキット	2500ウェル分	<b>14,560円</b> (通常: 20,800円)	保存: 4~10℃ 遮光保存 1年間 輸送: 常温

プレートリーダー購入時 試薬無料 2023年8月31日ご注文まで

対象: WSL-2300 Phelios AL

無料特典 (いずれか1点)

- WSE-7145 EzELISA TMB (HRP用発色試薬)
- WSE-7510 EzBradford Protein Assay Kit
- WSE-7520 EzBCA Protein Assay Kit

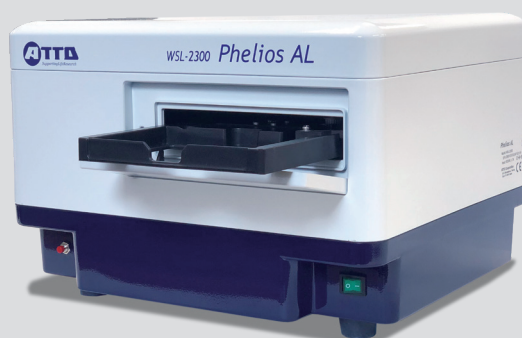

# EzBCA Protein Assay Kit

イージーBCA プロテイン アッセイキット

総タンパク質定量用  
BCAアッセイ試薬



WEBサイト  
詳細情報


特典有効期間 2024年3月31日まで

還元剤を含むサンプルでもタンパク質定量が可能

商品構成	容量	保存温度
① Pretreatment Agent	800 mg	4~10℃
② Pretreatment Solution	50 mL	4~10℃
③ BCA Reagent A	500 mL	室温
④ BCA Reagent B	12 mL	室温
⑤ BGG Standard (2mg/mL)	10 mL	4~10℃
⑥ BSA Standard (2mg/mL)	10 mL	4~10℃



「還元剤」を含むタンパク質溶液の定量手順

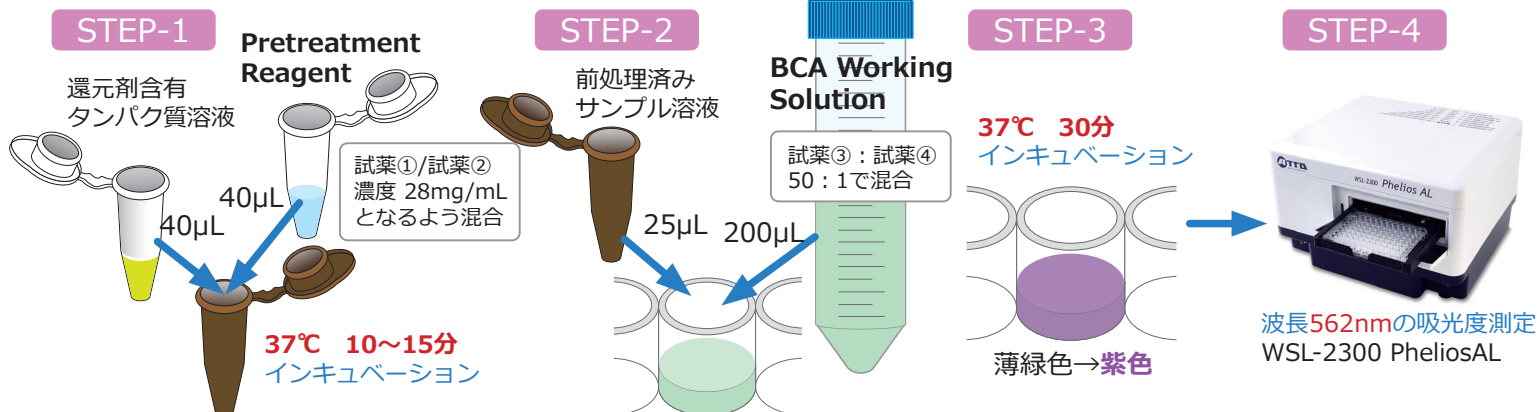

初回購入特典 30%OFF

特典有効期間 2024年3月31日

商品コード	型式・名称	容量	特別価格 (税別)	温度管理
2332386	WSE-7520CP EzBCA Protein Assay Kit イージーBCA プロテインアッセイキット	2500ウェル分	<b>18,060円</b> (通常：25,800円)	保存：4~10℃※ 遮光保存 1年間 輸送：常温


※BCA Reagent A(500mL) / B (12mL) は室温保存です。

タンパク質定量試薬+関連商品 同時購入30%OFF 2023年8月31日ご注文まで

商品コード	型式・名称	30%OFF価格
2332386	WSE-7520CP EzBCA Protein Assay Kit	18,060円
4002620	WSC-2620 PowerBLOCK	92,400円
4002666	96ウェルプレート用ブロック(2620/30)Q	18,480円


本カタログ内の表示価格は税別価格です。

期間中、ブロックインキュベータ (WSC-2620) 、96ウェルプレート用ブロック、EzBCA Protein Assay Kitの3点を同時注文の場合に限り各製品を30%OFF価格でご提供します。

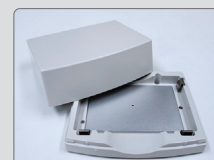

# KronoAnalyzer

新発売！ リズムデータ解析ソフト クロノアナライザー

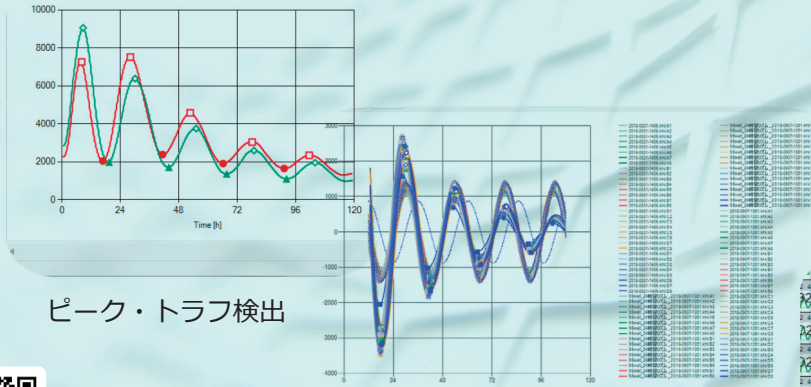

ピーク・トラフ検出

デトレンド処理・リズム比較



WEBサイト  
詳細情報

解析対象 ATTO測定機器

WSL-1565 Kronos HT  
AB-2550 Kronos Dio  
AB-2500 Kronos



リズムデータ一覧表示

商品コード	型式・名称	特別価格 (税別)
3510155	KronoAnalyzer クロノアナライザー	<b>210,000円</b> (通常：300,000円)

購入期限 2023年8月31日ご注文分まで  
特別価格適用条件


- ・ ATTO Kronosシリーズユーザー様
- ・ WSL-1565 Kronos HTと同時購入時
- ・ AB-2550 Kronos Dioと同時購入時

対象となる生物や現象、実験系に合わせてデータ処理設定値を変更し、最適な条件で解析できます。データ処理条件設定項目には「ノイズ処理」「デトレンド」「ピーク/トラフ検出」「データ処理設定範囲」「周期解析」「バックグラウンド減算」があります。

ノイズフィルタを組み合わせると、メディアンフィルターでスパイクノイズを除去し、移動平均フィルターで細かいノイズを除去できます。


実験系に合わせて指定した時間幅のトレンドを除去します。ピーク/トラフ検出も同様に時間幅を指定します。

測定装置固有のバックグラウンドノイズ値を減算できます。

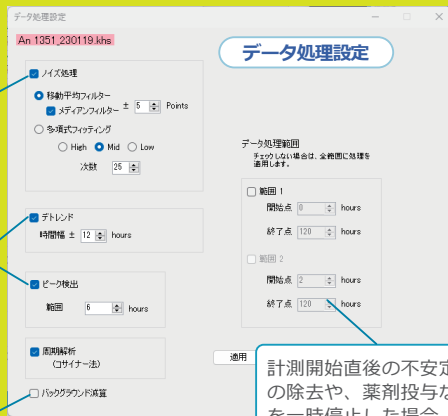

計測開始直後の不安定なデータの除去や、薬剤投与などで測定を一時停止した場合、これらの時間帯を含まないように設定し、解析することが可能です。

## シンプルな解析データ

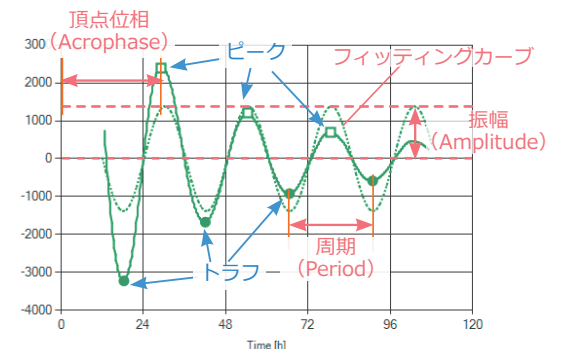

KronoAnalyzerは様々な時系列データを最適な状態で処理し、複数のファイルの多数のデータを同時に比較解析できます。周期 (Period)、頂点位相 (Acrophase)、振幅 (Amplitude)、ピーク/トラフ値からなるシンプルな解析結果だからこそ容易に比較できます。

ご用命は下記販売店までお問合せください。

製品に関する詳細はアトー株式会社までお問合せください。

**アトー株式会社**  
ATTO

- 東京本社 〒111-0041 東京都台東区元浅草3-2-2  
☎ (03)5827-4861 ☎ (03)5827-6647
- 大阪支店 〒530-0044 大阪市北区東天満2-8-1 若杉センタービル別館 5F  
☎ (06)6136-1421 ☎ (06)6356-3625
- メンテナンスサービス 〒110-0016 東京都台東区台東2-21-6  
☎ (03)5818-7567 ☎ (03)5818-7563

■ URL <https://www.atto.co.jp/> お問い合わせ WEB会員登録の上お問合せフォームより