

標準サイズ(13×14cmゲル)の スラブ電気泳動槽・ゲル作製器

永年の実績を誇るアトーの「スラブ電気泳動シリーズ」標準型!

AE-6220 ラピダス 二連スラブ電気泳動槽 AE-6210 ラピダス スラブゲル作製器



AE-6220 ラピダス 二連スラブ電気泳動槽

泳動プレート・コウムは付属しません。 リード線は付属しています。



AE-6210 ラピダス スラブゲル作製器

ラピダス・二連スラブ電気泳動槽は、中型のスラブゲル電気泳動装置です。ゲルサイズが大きいため、試料アプライ量が多く、泳動距離を長くとれるのでバンドが多いサンプル、分離能を重視する電気泳動に適しています。専用プレートホルダーで簡単に装着できます。

ゲルは、AE-6210ラピダススラブゲル作製器を使用して作製します。初めての方でも漏れなくゲル作製が可能です。

目的・用途

タンパク質の分離・同定、純度確認、分子量推定 等

精製物・発現タンパク質の確認、PCR産物の確認

酵素型・遺伝子型判定

 ${\tt SDS-PAGE}.\ \, {\tt Native-PAGE}.\ \, {\tt DNA} \\ \mathcal{O}{\tt PAGE}$

PAGE = PolyAcrylamide Gel Electrophoresis


特長

AE-6220 ラピダス 二連スラブ電気泳動槽

- ・最大ゲル2枚まで同時に電気泳動可能
- ・ゲルサイズは13×13.8cmの十分な大きさ ・試料のアプライがしやすい前面オープン構造
- ・簡単ゲルプレートセッティング押し圧式「プレートホルダー」
- ・厚めのアクリル素材で採用 RI遮断効果
- ・プレート背面全面恒温で「脱スマイリング」

AE-6210 ラピダス スラブゲル作製器

- ・専用のシールガスケットと装置で簡単セッティング ガラスプレート、シールガスケットを順番に置くだけ 初めての方でも液漏れなしにゲル作製ができます
- ・ゲル厚0.5~2.0mm(ガラスプレート総厚10.5~12mm)に対応

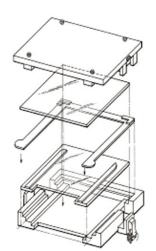

ラピダススラブゲル作製器 セット図



仕様

仕様	AE-6220 ラピダス 二連スラブ電気泳動槽		
ゲル枚数 / サイズ	1 枚または2 枚 138×130mm 厚さ1mm(標準)		
泳動プレートサイズ	160×160mm トータル10.5~12mm厚に対応		
バッファー容量	930mL (下部槽450mL 上部槽480mL)		
泳動槽部極性	リード線を電源に接続時に選択		
安全対策	リード線付き安全カバー		
本体寸法・質量	211mm(W)×196mm(D)×205mm(H) (突起除<) 2.3kg		
構成品	本体(泳動槽部、安全カバー、プレートホルダー)、リード線、 ダミープレート、取扱説明書		

仕様	AE-6210 ラピダス スラブゲル作製器
ゲル枚数 / サイズ	1枚 138×130mm 厚さ1mm (標準)
泳動プレートサイズ	160×160mm 標準ゲル厚1mm トータル11mm厚
試料アプライ量	12検体コウム(6mm歯幅)使用時 最大約60µL/ウェル
本体寸法・質量	250mm(W)×150mm(D)×80mm(H) (突起除く) 1kg (本体のみガラスプレート除く)
構成品	本体、ガラスプレート(RAB-10、RB-00)、コウム(12検体、 1 mm厚)、シールガスケットRS-01、取扱説明書



AE-6220 ラピダス 二連スラブ電気泳動槽



AE-6210 ラピダス スラブゲル作製器

価格

コードNo.	型式・名称	数量	価格
2392990	AE-6220 ラピダス 二連スラブ電気泳動槽	1台	180,000円
2392980	AE-6210 ラピダス スラブゲル作製器 (1mm用ガラスプレートセット・シールガスケット・コウム付き)	1式	100,000円
2392012	AE-6210X ラピダス スラブゲル作製器(本体のみ)	1式	問合せ
2392020	RP-10 泳動プレートセット(1mm用)	1セット	33,000円
2392024	RP-20 泳動プレートセット(2mm用)	1セット	33,000円
2393081	RP-075 泳動プレートセット(0.75mm用)	1セット	18,000円
2392031	RB-00 泳動プレート 2 枚組	1組	20,000円
2392029	RAB-10 泳動プレート 2 枚組(1mm用)	1組	40,000円
2392030	RAB-20 泳動プレート 2 枚組(2mm用)	1組	40,000円
2393083	RAB-075 泳動プレート 2 枚組(0.75mm用)	1組	40,000円
2392032	RS-01 シールガスケット 3 枚組(1mm用)	1組	9,000円
2392033	RS-02 シールガスケット 3 枚組(2mm用)	1組	9,000円
2393087	RS-075 シールガスケット 3 枚組(0.75mm用)	1組	9,000円
2392061	RS10-12 スマイリングレスコウム(1mm厚 12検体)	1枚	15,000円
2392060	RS10-08 スマイリングレスコウム(1mm厚 8検体)	1枚	15,000円
2392062	RS10-20 スマイリングレスコウム(1mm厚 20検体)	1枚	15,000円
2392064	RS20-12 スマイリングレスコウム(2mm厚 12検体)	1枚	15,000円
2393085	RS075-12 スマイリングレスコウム 2枚組(0.75mm厚 12検体)	1組	30,000円

※その他のゲル厚仕様、検体数の異なるコウム等についてアトーまでお問合せください。

202510

株式会社

生化学·分子生物学·遺伝子工学研究機器 開発/生産/販売/サービス

- ●発光・蛍光イメージングシステム
- ●画像解析ソフトウエア ●電気泳動装置
- ●電気泳動関連試薬 ●ウエスタンブロット試薬
- ●ペリスタポンプ ●細胞培養・観察システム
- ■東京本社 〒111-0041 東京都台東区元浅草3-2-2 ☎(03)5827-4861(代表) ⑥(03)5827-6647
- ■大阪支店 〒530-0044 大阪市北区東天満2-8-1
 - 若杉センタービル別館 5F
- ☎(06)6136-1421(代表) ⑥(06)6356-3625
- ■技術開発センター 〒110-0016 東京都台東区台東2-21-6 ☎ (03)5818-7560(代表) ⑥ (03)5818-7563
- ◆メンテナンスサービスグループ ☎(03)5818-7567(代表) ⑥(03)5818-7563

■URL https://www.atto.co.jp/